

Technical Data Sheet

FFP3 NR maska bez ventilu s ušními smyčkami
Certifikováno jako OOP kategorie III




 Výrobce:

Xiamen Miaoxing Technology Co.,Ltd

Adresa: 5. patro, č. 333-4 TongFu Road,
TongAn district, Xiamen, Čína

www.xmmiaoxing.com

Technické údaje o produktu

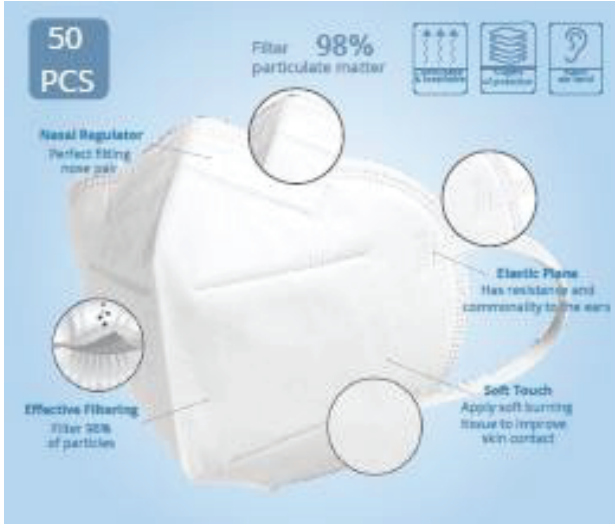

Materiál	NETKANÁ TKANINA – 100 % bez latexu
Barva	Bílá
Značka	MYS
Model	MV99
Výrobce	Xiamen Miaoxing Technology Co., Ltd
Evropský zástupce	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
CND	T0399
RDM	2527991
Kategorie OOP	III
Datum výroby	03/2024
Datum expirace	03/2027

Použití a aplikace produktu

Masky FFP3 jsou kategorií filtračních masek, které poskytují vysokou úroveň ochrany dýchacích cest. Jsou navrženy tak, aby filtrovaly jemné částice, aerosoly a škodlivé látky ve vzduchu, a poskytují tak větší ochranu než chirurgické masky nebo masky FFP3.

Hlavní vlastnosti a použití masek FFP3:

- Ochrana před jemnými částicemi: Masky FFP3 jsou navrženy tak, aby odfiltrovaly alespoň 99 % částic ve vzduchu, včetně aerosolů, jemného prachu, výparů a mlhy.
- Prostředí s vysokým rizikem: Masky FFP3 se často používají v prostředích s vysokým rizikem vystavení nebezpečným látkám, jako jsou patogeny, toxický prach, azbest, svařovací dýmy a jiné škodlivé jemné částice.
- Průmyslová odvětví: Jsou široce používány v chemickém průmyslu, kovozpracujícím průmyslu, stavebnictví, farmaceutickém průmyslu a dalších pracovních situacích, kde může být zdraví pracovníků ohroženo škodlivými látkami ve vzduchu.
- Pokročilé lékařské postupy: V některých lékařských situacích, jako je provádění invazivních zákroků nebo léčba pacientů s vysoce nakažlivými chorobami, lze masky FFP3 použít k ochraně zdravotnických pracovníků.
- Individuální ochrana: Lidé s oslabeným imunitním systémem nebo zdravotními problémy, které je činí obzvláště náchylnými k infekcím, mohou používat masky FFP3 jako dodatečnou ochranu při vystavení prostředí s potenciálními patogeny.
- Ekologické mimořádné události: V případě ekologických mimořádných událostí, jako jsou požáry, sopečné erupce nebo jiné situace, kdy je vzduch kontaminován toxickými látkami, lze masky FFP3 použít k zajištění bezpečného dýchání.

Specifické vlastnosti produktu



• Elastické ušní pásky připevněné k tělu masky • Pěnová nosní vložka • Bez výdechového ventilu • Ochrana před PM3 • Pohodlné nošení • Vysoká účinnost • Bez použití lepidla • BEZ formaldehydu • Vhodné pro všechny typy obličejů • Bez použití kovových sponek • Ochrana brady, nosu a úst • Nastavitelná nosní podložka • Bez niklu	• Bez latexu • Na jedno použití • Biokompatibilní produkt • Vyrobeno z odolného hypoalergenního materiálu • Design, který umožňuje dokonalé přilnutí k obličeji • Účinnost filtrace: Míra filtrace nemastných částic > 99 %. • Jedna velikost pro všechny
---	--

CERTIFIKÁTY A ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY

CERTIFIKÁT ES	Modul B: vydaný oznámeným subjektem č. 0370-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS) Certifikát č. 0370-5369-PPE/B V souladu s evropskou směrnicí 2016/425
	Modul C2: vydáno oznámeným subjektem č. 0370-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS) Certifikát č. 0370-7071-PPE/CZ V souladu s evropskou směrnicí 2016/425
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PODLE EVROPSKÉ NORMY EU 2016/425	VÝROBCE
LABORATORNÍ ZKOUŠKA POTVRZUJÍCÍ SHODU S EVROPSKOU NORMOU EN 149:2001+A1:2009	Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd. (PTC) ČÍSLO ZKOUŠKY ODKAZUJÍCÍ NA MODUL B: PTC21012905401C-EN01 TEST Č. ODKAZUJÍCÍ NA MODUL C2: PTC24011707601C-EN01

BALENÍ

Balení (1. úroveň)	1 (jedna) maska v uzavřeném plastovém sáčku.
Balení (2. úroveň)	50 (padesát) zapečetěných plastových sáčků (50 masek) v kartonové krabici.
Balení (3. úroveň)	40 (čtyřicet) kartonových krabic (2000 masek) v kartonu
Hmotnost a rozměry kartonu	Hmotnost 17 kg – rozměry 67 × 66 × 34 cm

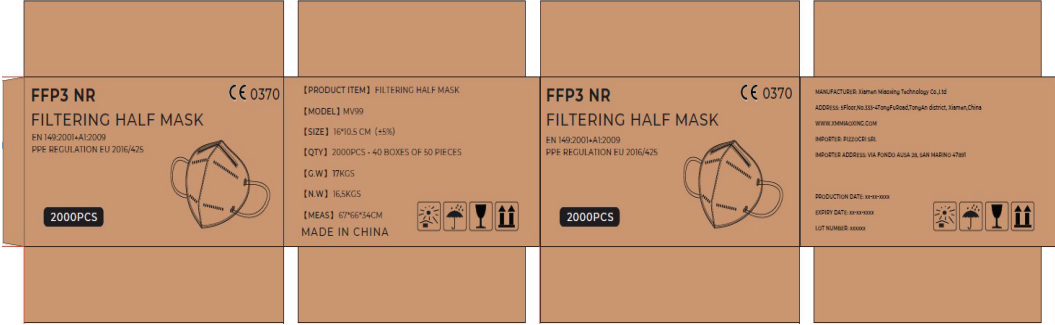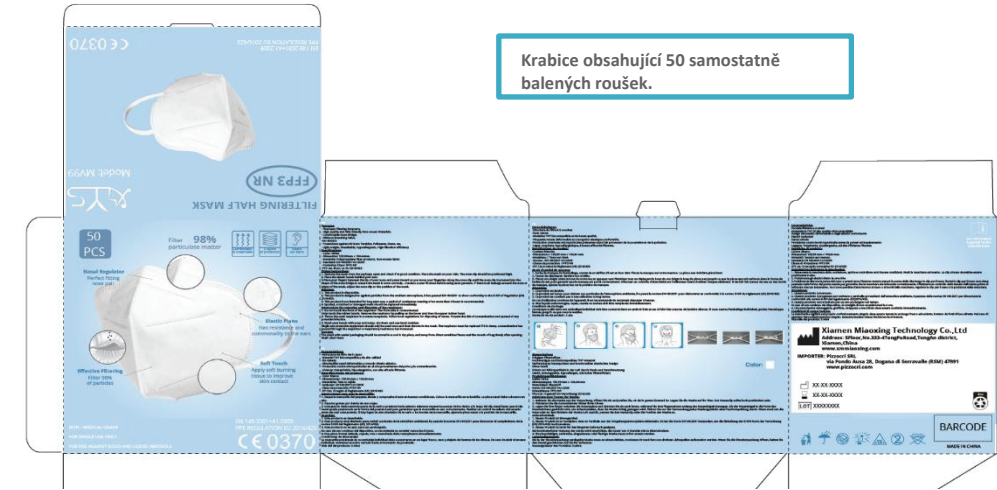

Každé balení obsahuje všechny informace požadované platnými předpisy a nezbytné pro správné a bezpečné používání zařízení. Na baleních je uveden typ, množství, datum expirace a kód produktu. Balení jsou „na jedno použití“. Na každém jednotlivém balení a každém jednotlivém vnějším obalu jsou uvedeny údaje podle směrnice 2007/46/ES, zákonného nařízení č. 37 ze dne 25. ledna 2010. Účel použití je uveden na balení.

Zařízení jsou balena v obalech, které zajišťují správné skladování a snadné stohování. Jednotlivé obaly jsou baleny v pevných, prachotěsných krabicích. Obalový materiál je odolný a navržen tak, aby zajistil správné uchování produktu. Všechny jednotlivé obaly a přepravní obaly jsou opatřeny nesmazatelnými štítky, na kterých jsou v různých jazycích uvedeny všechny nápisy požadované platnými předpisy. Na obalu jsou v několika jazycích uvedeny všechny informace požadované platnými předpisy a nezbytné pro správné a bezpečné používání produktu.

NÁVOD K POUŽITÍ

2. Uši uchytěte za ušní smyčky.
3. Umístěte prst mezi špičku nosu a zatlačte dovnitř, zatímco posunujete špičku prstu podél nosního klipu, dokud se nosní klip nepřizpůsobí tvaru nosního můstku, aby bylo zajištěno správné nasazení masky.
4. Před použitím každého oděvu proveďte kontrolu těsnosti. Pokud dochází k úniku vzduchu kolem nosu nebo okrajů masky, upravte nosní sponu nebo polohu masky.

